



Tefal
baby home

PÈSE-BÉBÉ Baby-scales



F

NL

D

I

GB

GR

TR

RUS

UA

PL

CZ

SK


H

BG

RO

HR

www.tefal.com
www.disneybaby.com

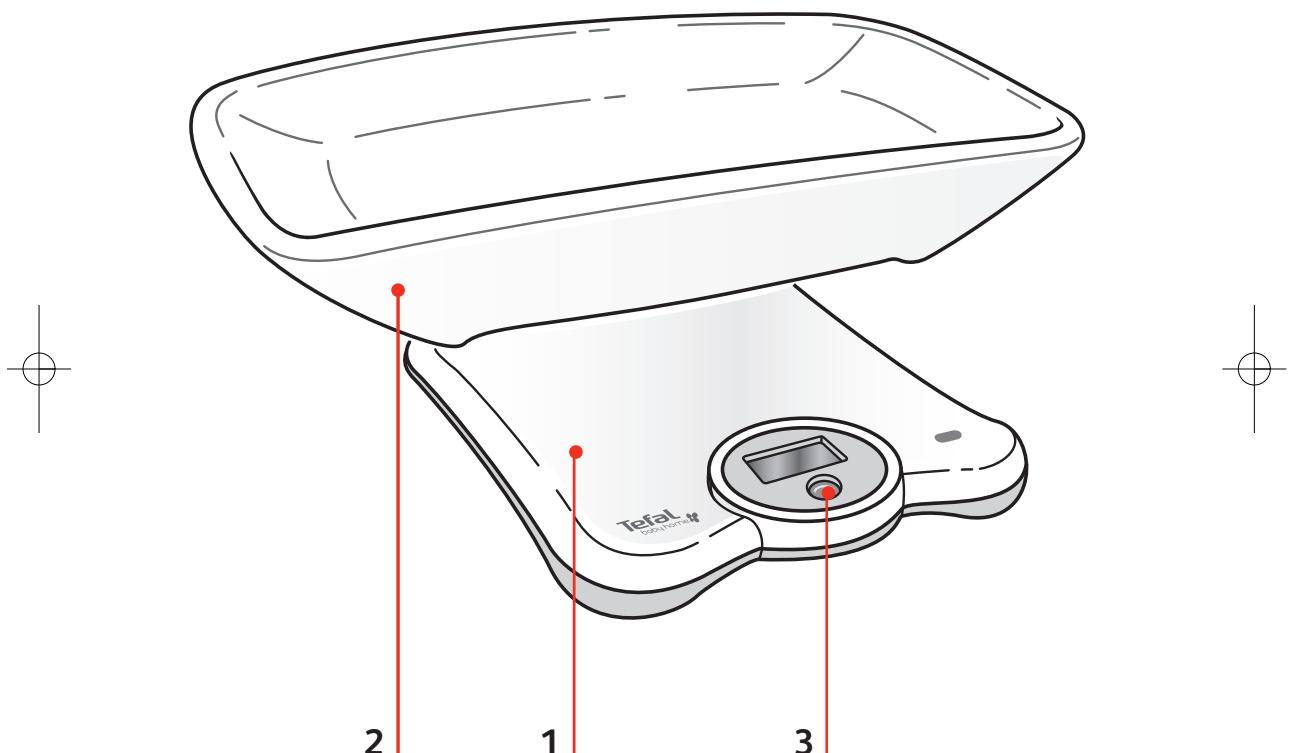

2

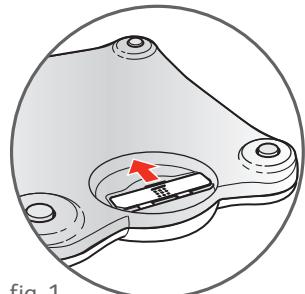


fig. 1

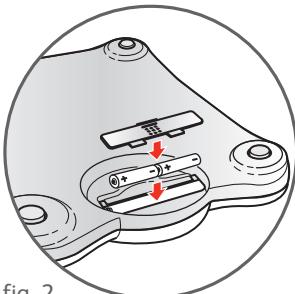


fig. 2

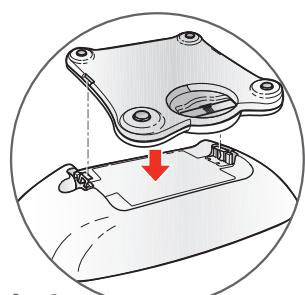


fig. 3

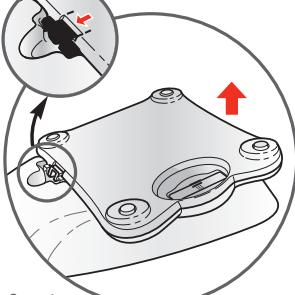


fig. 4

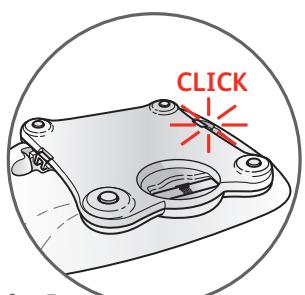


fig. 5

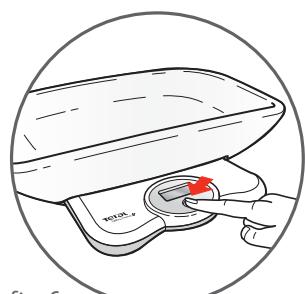


fig. 6

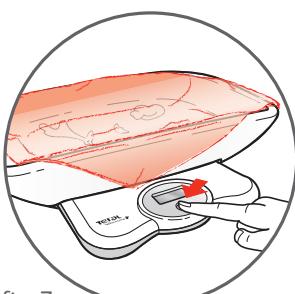


fig. 7



fig. 8

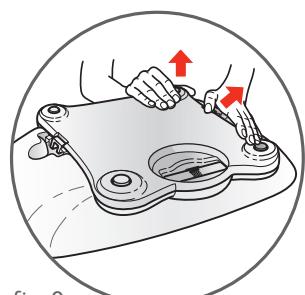


fig. 9

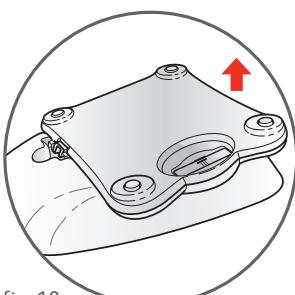


fig. 10



fig. 11

Описание

1. Весы
2. Чаша
3. Кнопка Включено/Выключено - Сброс на ноль

Перед первым использованием

Установка батареек

Снимите крышку отсека для батареек (в нижней части прибора, **fig. 1 - fig. 2**), затем вставьте 2 новые одинаковые щелочные батарейки типа 1,5 V LR03-AAA (проверить срок годности). Закройте крышку.



Не выбрасывать использованные батарейки:
Обращаться с ними как с химическими отходами.

RUS

Установка чаши

Переверните съемную чашу, переверните также платформу (**fig. 3**) таким образом, чтобы метки оказались напротив указателя "CLICK" (**fig. 4 - fig. 5**) и нажмите до щелчка.

Верните прибор в исходное положение. Прибор готов к работе.

Меры предосторожности

- Не располагать около источника тепла.
- Такие приборы, как микроволновые печи или сотовые телефоны, используемые около весов, могут привести к искажению показаний веса.
- При чистке прибора, протирать его влажной губкой. Не использовать абразивных веществ. Никогда не погружать в воду.
- При хранении обратить внимание на то, чтобы прибор был выключен. Ничего не ставить на весы.

Действие прибора

Включение – Взвешивание

Поставьте весы (**fig. 6**) на плоскую и твердую поверхность, убедитесь при этом, что они устойчивы и не касаются никакого предмета. Нажмите на кнопку **O/I**, на экране загорается индикатор **8888**, затем **0g**.

Если вы положили на чашу полотенце, снова нажмите на кнопку **O/I** для того, чтобы исключить его вес (**fig. 7**).

На экране загорается индикатор **0000**, затем **0g**.

Положите малыша на чашу (**fig. 8**).

Показания веса высвечиваются на экране примерно в течение 40 секунд.

При первом использовании мигающий индикатор показаний веса указывает, что вес вводится в память.

Разница в весе

При последующем взвешивании, разница в весе рассчитывается по отношению к предыдущему взвешиванию. После стабилизации, показания веса и разницы в весе высвечиваются поочередно приблизительно в течение 40 сек, что указывает на то, что последнее показание веса вводится в память. Следует взвешивать ребенка регулярно, поскольку прибор показывает разницу веса по отношению к предыдущему взвешиванию в пределах 1 кг. Превышение данного ограничения приводит к обнулению памяти (повторить действия, предусмотренные для первого использования).

Данная функция прибора может использоваться только для детей, вес которых превышает 2 кг.

Остановка

Прибор останавливается автоматически:

- Примерно после 40 сек высвечивания результатов взвешивания.
- Как только ребенка снимают с весов.
- После 40 сек работы прибора без взвешивания.

Прибор останавливается вручную нажатием на кнопку  при загорании индекса .

Весы для детей (в положении стоя на платформе)

Переверните весы и демонтируйте съемную чашу одной рукой, поддерживая весы другой рукой (**fig. 9**

- **fig. 10**).

RUS

Действие прибора аналогично (см. Включение - Взвешивание).

Ребенок стоит на платформе, не двигаясь (**fig. 11**).

Не превышать максимальный вес 20 кг.

Специальные символы

- | | |
|--|--|
|  BAT | Индикатор уровня заряженности батареек. |
|  0000 | Индикатор обнуления. Максимальный сброс веса: 2 кг. |
|  5EP | Указывает, что вес превышает 20 кг. |
| Не превышать максимальную нагрузку. | |
|  Err | Появляется, когда на платформу перед включением кладут нагрузку, превышающую 2,5 кг. |
| Снять нагрузку с платформы. Перед взвешиванием включить прибор. | |
|  --- | (Отрицательная величина). Появляется в том случае, когда после включения прибора вес с платформы снимается или в случае, когда весы касаются предмета, мешающего его нормальному функционированию. |
| Чтобы вернуться к 0, нажать на  . | |